


Bestway Medical Polymer  
Corporation  
百仕韦医疗



制造商：福建省百仕韦医用高分子股份有限公司  
生产基地：福建省福州市浦上工业区冠浦路 138 号  
电话：0591-83855222 传真：0591-83855972  
www.biociv.com E-mail: glb@biociv.com


CE 0197  
ISO 13485:2012  
ISO 9001:2008

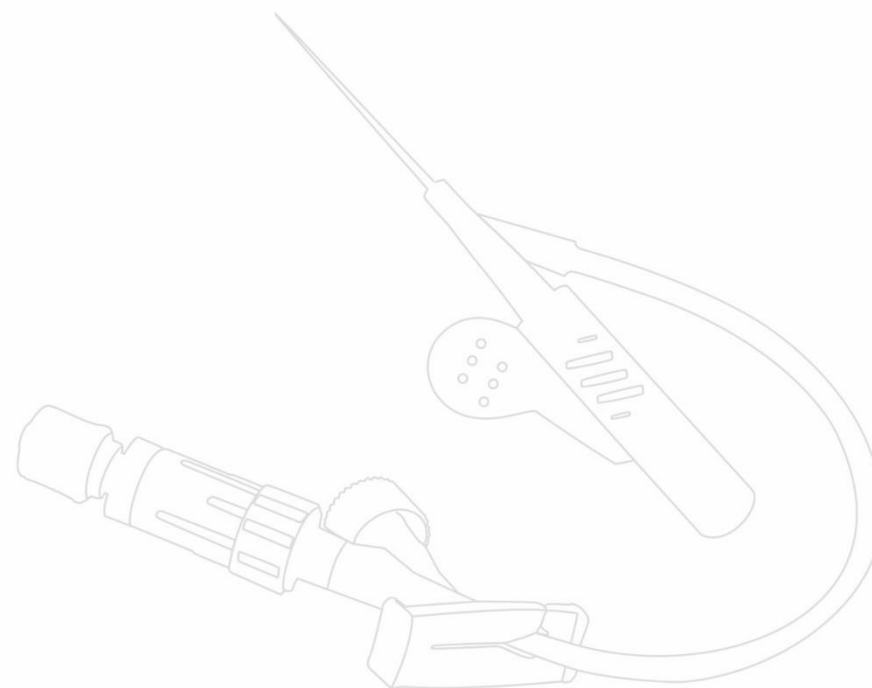



# 您用针 我用心

安全输液 就选百仕韦

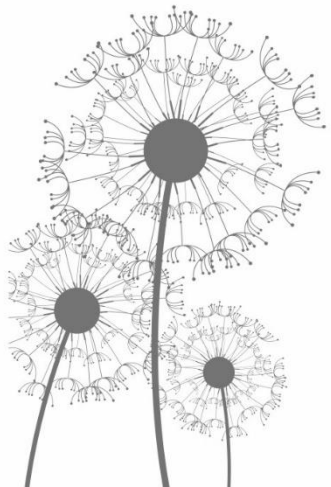

## 百仕韦留置针综述

双重安全 = 防针刺伤 + 隔离血源性感染源 + 降低机械性静脉炎 + 安全留置

### 轻松穿刺，平滑与方便地穿刺进入静脉血管

导管采用先进的生物材料制作 与针尖的完美结合，使得穿刺过程方便柔顺  
锋利的针尖和独特的导管缩尖技术，方便穿刺皮肤并进入血管

### 防针刺伤：

百仕韦专利安全针收纳装置，撤针时钢针自动收纳于装置内，钢针全包裹，防止针尖外露造成的意外锐器伤害，避免血液接触，建立隔离屏障。

### 隔离血源性感染源，降低发生感染风险

采用专利的安全针收纳装置，杜绝在静脉输液操作中受到传染疾病的巨大危险  
百仕韦专利的安全针收纳装置，还可避免锐器刺伤造成的皮肤黏膜损伤

### 降低机械性静脉炎发生

减少反复穿刺静脉造成的静脉炎风险  
延长周围静脉通路时间

### 安全留置

提高患者输液治疗质量  
减少了使用过程中并发症的发生，确保了患者的静脉输液安全

### 正压装置

独特的MSP（手动螺旋推进）技术持续稳定正压，非触发装置，药液直通，液体不残留，不产生回弹式负压回血造成的堵管。

### 26G静脉留置针

更小钢针，更细导管，更小损伤，更适合于婴幼儿，老年人等细小血管的患者。  
专利26G钢针不开槽留置针，有独特的快速回血观察窗，实现快速观察回血功能。


\*《输液治疗护理实践指南与实施细则》第二部分第一节指出：锐器物（针头和注射器）应在使用完毕后立即放入专用处理容器，操作者在操作时应携带专用处理容器。

\*《输液治疗护理实践指南与实施细则》第二部分第二节指出：所有的导管均为一次性物品，禁止重复使用或者一次穿刺失败后取出后再次置入。

## 好产品更需要完美操作

- ① **评估：**  
根据病人治疗及病情选择最合适的输液方案及工具，并为静脉通路安全、长期留置建立基础；
- ② **准备：**  
常规准备、治疗盘、留置针、敷贴准备；
- ③ **选择：**  
INS标准：在满足输液治疗的前提下，尽量选择管径最细、长度最短、管腔最少的导管；
- ④ **消毒：**  
以穿刺点为中心呈螺旋状向外，面积8\*8cm，待干；
- ⑤ **穿刺：**  
拔去针帽，左右松动针芯后复原，严禁上下松动，损伤导管；在血管上方以15-20度直刺血管，见回血后降低角度继续进针0.2cm；
- ⑥ **送管：**  
左手拇指持“Y”接口处固定，右手后撤针芯将针尖斜面退入导管后绷紧皮肤，左手将导管全部送入血管内，打开调节器观察滴速，滴速正常后右手将针芯全部撤出丢弃于防针刺污物盒内；
- ⑦ **固定：**  
用无菌敷料贴以穿刺点为中心无张力塑形贴；

## 带正压装置安全型留置针

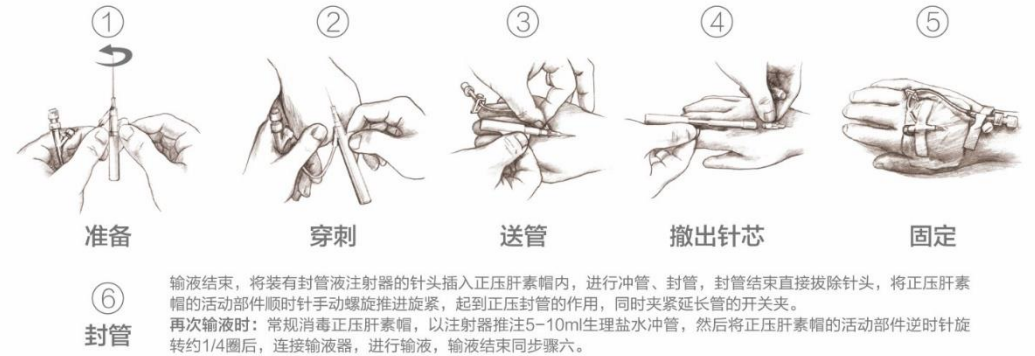

## 开放安全型留置针



## 封闭留置针



# 百易捷 正压安全开关装置

发明专利 · INVENTION PATENT

| 护士          |  | 患者     | 医院             |
|-------------|--|--------|----------------|
| ● 操作简单，节约时间 |  | ● 防止堵管 | ● 改善患者留置针使用依从性 |
|             |  |        | ● 降低医院使用和培训成本  |



## 百易时 留置时间印记装置

发明专利 • INVENTION PATENT


- 与止流夹融为一体的时间记录器
- 时间和日期设定不可逆
- 留置时间清晰可见，无丢失及辨识不清困扰
- 有效降低护士因时间标记不清增加的工作量



## 百易扣 输液安全固定装置

发明专利 • INVENTION PATENT

- 结构简易，操作简便
- 稳妥固定，防止脱落
- 媲美无针，物有所值

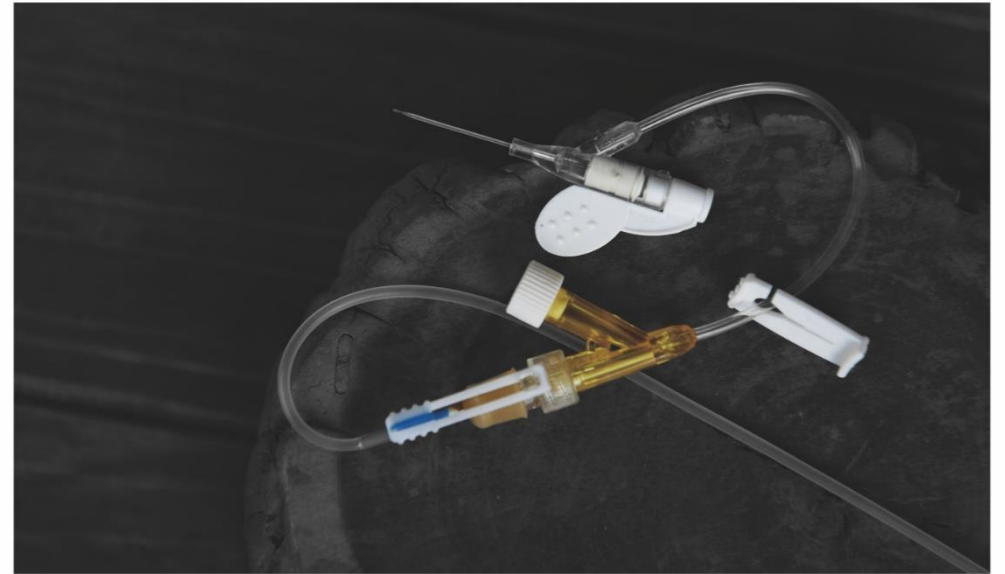

## 百易善 应用友好型留置针

发明专利 • INVENTION PATENT

- 操作简易
- 穿刺后可轻松遮蔽针管
- 防针刺伤、防血源性污染
- 对环境和社会安全





## 带正压装置的安全型留置针

- 钢针针尖背部激光打磨处理，更易穿刺，更灵活的穿刺角度，提高不同情况下置管成功率，静脉切口“V”字型或三尖型，减轻血管撕裂伤，减少穿刺点渗血渗液，切口处止血更为迅速，愈合快；
- 导管柔顺，生物相容性好，降低对血管壁刺激，减少静脉炎的发生，表面采用独特的润滑配方涂层，送管更顺利，减轻患者的痛苦；
- 百仕韦独特的MSP专利正压装置，持续稳定正压，不会产生回弹式负压回血造成的堵管，专利正压装置操作简便，消毒更彻底，直通的液体通路无死腔，满足临床输液的各种需求；
- 百仕韦专利钢针收纳装置，真正做到钢针全包裹，撤针时，收纳装置自动激活，完全包裹钢针，双重安全，防止针刺伤和防止血源性污染；

| 颜色代码 | 26G           | 24G           | 22G                                               | 20G                                               | 18G                                               |
|------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 规格   | 26G × 19mm    | 24G × 19mm    | <div>22G × 19mm</div> <div>22G × 25mm</div>       | <div>20G × 30mm</div> <div>20G × 48mm</div>       | <div>18G × 30mm</div> <div>18G × 48mm</div>       |
| 产品编号 | 586AQY(Z)2619 | 586AQY(Z)2419 | <div>586AQY(Z)2219</div> <div>586AQY(Z)2225</div> | <div>586AQY(Z)2030</div> <div>586AQY(Z)2048</div> | <div>586AQY(Z)1830</div> <div>586AQY(Z)1848</div> |

## 安全型留置针

- 百仕韦专利钢针收纳装置，真正做到钢针全包裹，撤针时，收纳装置自动激活，完全包裹钢针，双重安全，防止针刺伤和防止血源性污染；
- 导管柔顺，生物相容性好，降低对血管壁刺激，减少静脉炎的发生，表面采用独特的润滑配方涂层，送管更顺利，减轻患者的痛苦；
- 钢针针尖背部激光打磨处理，更易穿刺，更灵活的穿刺角度，提高不同情况下置管成功率，静脉切口“V”字型或三尖型，减轻血管撕裂伤，减少穿刺点渗血渗液，切口止血更为迅速，愈合快；

| 颜色代码 | 26G          | 24G          | 22G                          | 20G                          | 18G                          |
|------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 规 格  | 26G × 19mm   | 24G × 19mm   | 22G × 19mm<br>22G × 25mm     | 20G × 30mm<br>20G × 48mm     | 18G × 30mm<br>18G × 48mm     |
| 产品编号 | 58AQY(Z)2619 | 58AQY(Z)2419 | 58AQY(Z)2219<br>58AQY(Z)2225 | 58AQY(Z)2030<br>58AQY(Z)2048 | 58AQY(Z)1830<br>58AQY(Z)1848 |





## 封闭型留置针

- 密闭式一体化设计，保护操作者在穿刺过程中避免血液污染；
- 钢针针尖背部激光打磨处理，更易穿刺，更灵活的穿刺角度，提高不同情况下置管成功率，静脉切口“V”字型或三尖型，减轻血管撕裂伤，减少穿刺点渗血渗液，切口处止血更为迅速，愈合更快；
- 导管柔顺，生物相容性好，降低对血管壁刺激，减少静脉炎的发生，表面采用独特的润滑配方涂层，送管更顺利，减轻患者的痛苦；

| 颜色代码 | 26G          | 24G          | 22G                                             | 20G          | 18G          |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 规 格  | 26G × 19mm   | 24G × 19mm   | <div>22G × 19mm</div> <div>22G × 25mm</div>     | 20G × 30mm   | 18G × 30mm   |
| 产品编号 | 58FBY(Z)2619 | 58FBY(Z)2419 | <div>58FBY(Z)2219</div> <div>58FBY(Z)2225</div> | 58FBY(Z)2030 | 58FBY(Z)1830 |

## 带正压装置的封闭型

- 钢针针尖背部激光打磨处理，更易穿刺，更灵活的穿刺角度，提高不同情况下置管成功率，静脉切口“V”字型或三尖型，减轻血管撕裂伤，减少穿刺点渗血渗液，切口处止血更为迅速，愈合快；
- 导管柔顺，生物相容性好，降低对血管壁刺激，减少静脉炎的发生，表面采用独特的润滑配方涂层，送管更顺利，减轻患者的痛苦；
- 百仕韦独特的MSP专利正压装置，持续稳定正压，不会产生回弹式负压回血造成的堵管，专利正压装置操作简便，消毒更彻底，直通的液体通路无死腔，满足临床输液的各种需求；

| 颜色代码 | 26G           | 24G           | 22G                                               | 20G                                               | 18G                                               |
|------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 规 格  | 26G × 19mm    | 24G × 19mm    | <div>22G × 19mm</div> <div>22G × 25mm</div>       | <div>20G × 30mm</div> <div>20G × 48mm</div>       | <div>18G × 30mm</div> <div>18G × 48mm</div>       |
| 产品编号 | 586FBY(Z)2619 | 586FBY(Z)2419 | <div>586FBY(Z)2219</div> <div>586FBY(Z)2225</div> | <div>586FBY(Z)2030</div> <div>586FBY(Z)2048</div> | <div>586FBY(Z)1830</div> <div>586FBY(Z)1848</div> |



## 26G静脉留置针

- 更小钢针：提高细小脆性血管穿刺成功率；
- 更细导管：输液时，导管漂浮于血管中，减少机械摩擦和血管内壁的损伤，增加留置时间，使患儿舒适；
- 更少损伤：穿刺减轻疼痛，拔针后组织损伤小，愈合快；
- 更佳保护：百仕韦专利钢针收纳装置，真正做到钢针全包裹，撤针时，收纳装置自动激活，完全包裹钢针，双重安全，防止针刺伤和防止血源性污染。


| 颜色代码 | 26G <div></div> |              |              |              |
|------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 规 格  | 26G × 19mm      | 26G × 19mm   | 26G × 19mm   | 26G × 19mm   |
| 产品编号 | 68PTY(Z)2619    | 68PAY(Z)2619 | 58AQY(Z)2619 | 58FBY(Z)2619 |



## CT室专用留置针

- 封闭直型留置针能耐受300KPA的压力，防止延长管爆裂；
- 针座隔离塞后部加特殊垫片，防止隔离塞脱落；
- 密闭式一体化设计，保护操作者在穿刺过程中避免血液污染。

| 颜色代码 | 26G        | 24G        | 22G                                         | 20G                                         | 18G                                         |
|------|------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 规 格  | 26G × 19mm | 24G × 19mm | <div>22G × 19mm</div> <div>22G × 25mm</div> | <div>20G × 30mm</div> <div>20G × 48mm</div> | <div>18G × 30mm</div> <div>18G × 48mm</div> |
| 产品编号 | 58AQZ2619  | 58AQZ2419  | <div>58AQZ2219</div> <div>58AQZ2225</div>   | <div>58AQZ2030</div> <div>58AQZ2048</div>   | <div>58AQZ1830</div> <div>58AQZ1848</div>   |
| 产品编号 | 58FBZ2619  | 58FBZ2419  | <div>58FBZ2219</div> <div>58FBZ2225</div>   | <div>58FBZ2030</div> <div>58FBZ2048</div>   | <div>58FBZ1830</div> <div>58FBZ1848</div>   |

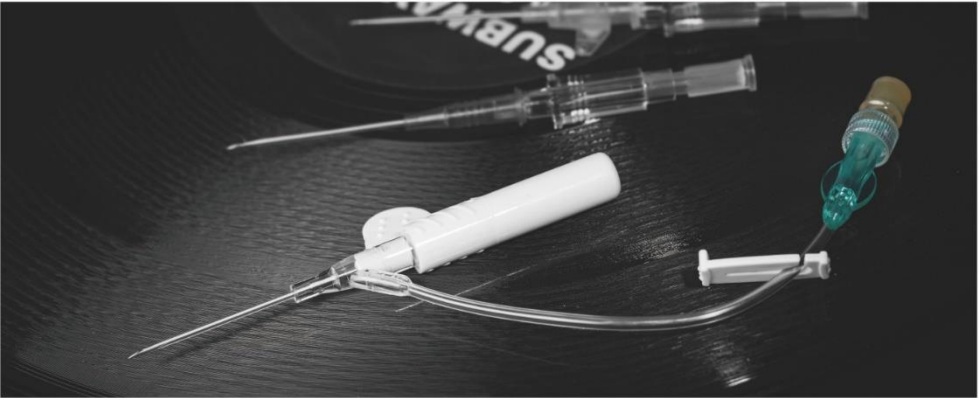

## 开放式（普通）安全型留置针

- 百仕韦专利钢针收纳装置，真正做到钢针全包裹，撤针时，收纳装置自动激活，完全包裹钢针，双重安全，防止针刺伤和防止血源性污染；
- 导管柔顺，生物相容性好，降低对血管壁刺激，减少静脉炎的发生，表面采用独特的润滑配方涂层，送管更顺利，减轻患者的痛苦；
- 钢针针尖背部激光打磨处理，更易穿刺，更灵活的穿刺角度，提高不同情况下置管成功率，静脉切口“V”字型或三尖型，减轻血管撕裂伤，减少穿刺点渗血渗液，切口处止血更为迅速，愈合快；

| 颜色代码 | 26G          | 24G          | 22G                                             | 20G                                             | 18G                                             |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 规 格  | 26G × 19mm   | 24G × 19mm   | <div>22G × 19mm</div> <div>22G × 25mm</div>     | <div>20G × 30mm</div> <div>20G × 48mm</div>     | <div>18G × 30mm</div> <div>18G × 48mm</div>     |
| 产品编号 | 68PAY(Z)2619 | 68PAY(Z)2419 | <div>68PAZ(Y)2219</div> <div>68PAZ(Y)2225</div> | <div>68PAZ(Y)2030</div> <div>68PAZ(Y)2048</div> | <div>68PAZ(Y)1830</div> <div>68PAZ(Y)1848</div> |



## 普通型留置针

- 操作简单，穿刺快速准确；
- 导管柔顺，生物相容性好，降低对血管壁刺激，减少静脉炎的发生，表面采用独特的润滑配方涂层，送管更顺利，减轻患者的痛苦；
- 钢针针尖背部激光打磨处理，更易穿刺，更灵活的穿刺角度，提高不同情况下置管成功率，静脉切口“V”字型或三尖型，减轻血管撕裂伤，减少穿刺点渗血渗液，切口处止血更为迅速，愈合更快；

| 颜色代码 | 26G          | 24G          | 22G                                             | 20G                                             | 18G                                             |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 规 格  | 26G×19mm     | 24G×19mm     | <div>22G×19mm</div> <div>22G×25mm</div>         | <div>20G×30mm</div> <div>20G×48mm</div>         | <div>18G×30mm</div> <div>18G×48mm</div>         |
| 产品编号 | 68PTY(Z)2619 | 68PTY(Z)2419 | <div>68PTY(Z)2219</div> <div>68PTY(Z)2225</div> | <div>68PTY(Z)2030</div> <div>68PTY(Z)2048</div> | <div>68PTY(Z)1830</div> <div>68PTY(Z)1848</div> |

